

BINGO EVOLUTION

HOGGI®

Το παιδικό καρότσι βόλτας BINGO EVOLUTION με τις καινοτόμες λύσεις και το μοντέρνο design καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων.

Το BINGO EVOLUTION έχει πολλαπλές ρυθμίσεις και επιλογές ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στο σώμα του δικού σας παιδιού. Επίσης διαθέτει **αποσπώμενο και αντιστρέψιμο κάθισμα**.

Η πολυλειτουργική αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος σας παρέχει επιπλέον άνεση και λύσεις για την καθημερινότητα.

Με εύχρηστο μηχανισμό αναδίπλωσης και ελαφρύ σκελετό αλουμινίου είναι το ιδανικό αμαξίδιο για όλες τις ασχολίες.

Αποτελείται από: 4τροχη βάση εξωτερικού χώρου, κάθισμα, προσκέφαλο και υποπόδιο.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη. Κάθε μέγεθος ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού για αρκετά χρόνια.



Αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος

Αφαιρέστε το κάθισμα εύκολα

...και διαλέξτε την κατεύθυνση που κοιτάει: μπροστά ή πίσω !

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο πλάτος καθίσματος, βάθος καθίσματος και ύψος πλάτης που ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού.
- Ρυθμιζόμενο μήκος κνήμης.
- Ρυθμιζόμενη κλίση υποποδίου.
- Μεγάλοι πίσω τροχοί.
- Εμπρός τροχοί με κλείδωμα κατεύθυνσης.




Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος έως 45°



Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης



Βολικά κεντρικά χειριστήρια.

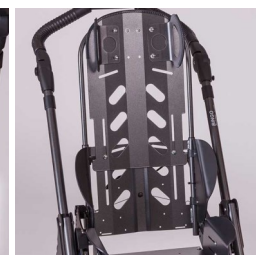


Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.




Φρένο συνοδού χειριζόμενο με το πόδι.



Πτυσσόμενο για μεταφορά.

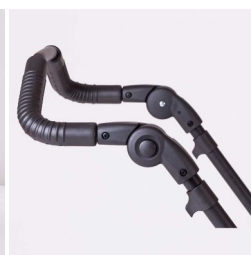

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

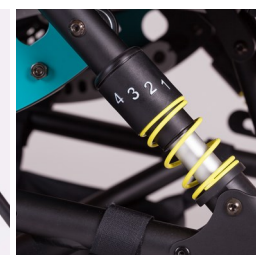

Αναρτήσεις με μηχανισμό

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επισκεφτείτε το wheel.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 2 XL
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	18-30 cm	23-35 cm	23-35 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	16-34 cm	22-40 cm	30-45 cm
ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	45°	45°	45°
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	45-63 cm	54-75 cm	62-83 cm
ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	16-37 cm	16-40 cm	16-40 cm
ΥΨΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ	75-110 cm	75-110 cm	86-118 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	63 cm	68 cm	68 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Μ x Π x Υ)	78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	50 kg	50 kg	50 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ	60 kg	60 kg	60 kg

Διαθέσιμα χρώματα σκελετού

- Sparkling iron effect
- Black dull matt

Διαθέσιμα χρώματα υφάσματος

- Sand
- Pink
- Turquoise
- Black check
- Red

BINGO COBRA

Τροχήλατη βάση για το κάθισμα του BINGO (πωλείται χωριστά)



Συνδυάστε το κάθισμα του BINGO με την τροχήλατη βάση COBRA και αποκτήστε μια ευέλικτη λύση για μέσα στο σπίτι!

Η βάση COBRA έχει ρυθμιζόμενο ύψος με υποβοήθηση μπουκάλας και ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος.